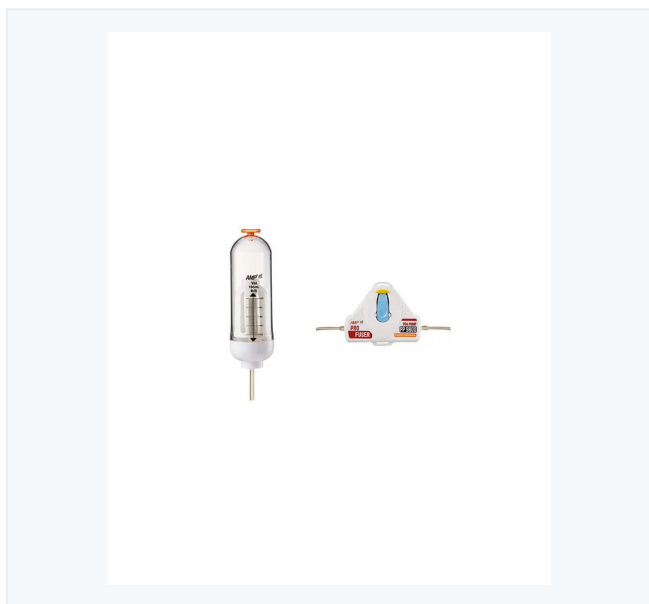


FICHE PRODUIT

Pompe PCA jetable PP-9800 à ballonnet (analgésie contrôlée par le patient)

Référence : SOC-PP9800

Description du produit

Pompe PCA jetable PP-9800 à ballonnet

La **pompe PCA jetable PP-9800** (gamme Profuser) est une pompe d'**analgésie contrôlée par le patient (PCA)** de type ballonnet. Elle administre le traitement antidouleur en s'appuyant sur la **pression positive stable et régulière d'un ballonnet élastomère**, sans recours à l'électronique ni à une source d'alimentation. Simple, légère et mobile, elle s'utilise aussi bien à **l'hôpital qu'à domicile**.

Le principe de la PCA à ballonnet

La PCA est une méthode par laquelle le **patient s'auto-administre son antalgique** selon l'intensité de sa douleur. Le ballonnet, préalablement rempli de solution médicamenteuse, se dégonfle de façon contrôlée et délivre un **débit continu constant**. Lorsque le patient ressent une douleur accrue, il peut déclencher une **dose bolus supplémentaire**, encadrée par une **période réfractaire (lock-out)** qui sécurise l'administration en empêchant une nouvelle prise avant le délai défini.

Voies d'administration

La PP-9800 peut être appliquée par voie **intraveineuse, péridurale et sous-cutanée**, ce qui en

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

fait une solution polyvalente pour la prise en charge de la douleur post-opératoire, chronique ou en soins palliatifs.

Sécurité et stérilisation

La pompe est **stérilisée aux rayons gamma**, méthode recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et plus sûre que la stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Elle est livrée avec un **capuchon de protection** évitant les changements de pression brusques et préservant l'intégrité du ballonnet pour une perfusion stable.

Caractéristiques techniques

Type : pompe PCA jetable à ballonnet, à usage unique. Débit maximal : **jusqu'à 100 ml**. Volume du bolus : **0,5 ml par déclenchement**. Temps de verrouillage (lock-out) du bolus : **15 minutes**. Précision : **±5 %** sur le volume approuvé. Voies : IV, péridurale, sous-cutanée. Existe en **série APS** selon les configurations.

Dispositif médical à usage unique destiné à un usage professionnel. Vérifiez l'intégrité de l'emballage stérile avant emploi et référez-vous à la notice.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/pompes-a-perfusion/18867-pompe-pca-jetable-pp-9800-a-ballonnet-analgesie-controlee-par-le-patient.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit

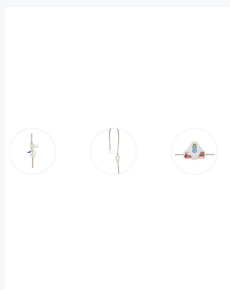

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com