

FICHE PRODUIT

Protège-bassin Dr HELEWA - sac absorbant 600 ml, boîte de 20

Référence : SOC-EURB60020

Points forts

- Marque : Dr.helewa
- Référence Euromedis : U60020

Description du produit

Protège-bassin jetable Dr HELEWA : le confinement des excréta à la source

Le **protège-bassin** Dr HELEWA est un dispositif à usage unique composé de deux éléments : un **sac** qui vient tapisser intégralement le bassin de lit et un **tampon super absorbant** positionné au fond. Il transforme radicalement une séquence de soin parmi les plus exposantes et les plus désagréables du quotidien hospitalier — le recueil et l'élimination des excréta d'un patient alité — en un geste propre, rapide et maîtrisé.

Le principe est celui du **confinement à la source**. Dès le premier contact, le tampon absorbe et gélifie les urines et les matières, jusqu'à **600 ml**. Le contenu cesse d'être liquide : il ne se renverse plus, n'éclabousse plus, ne s'écoule plus lors du retrait du bassin. Une fois le soin terminé, le soignant retire le sac, le referme et l'élimine selon le protocole de l'établissement. Le bassin, lui, n'a jamais été souillé : il ne part pas au lave-bassin, ne circule pas dans le service, ne retourne pas en zone de nettoyage avec son contenu.

Un enjeu de prévention des infections associées aux soins

La gestion des excréta est identifiée depuis plusieurs années comme l'un des points critiques de la lutte contre la transmission croisée en établissement de santé. Les selles constituent le réservoir

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

principal des bactéries multirésistantes et hautement résistantes émergentes — entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu ou de carbapénémases, entérocoques résistants aux glycopeptides, *Clostridioides difficile*. Chaque manipulation d'un bassin plein, chaque transport dans le couloir, chaque cycle en lave-bassin représente une occasion de dissémination : aérosolisation lors de la vidange, contamination des surfaces, des mains, des tenues.

Les lave-bassins eux-mêmes ne sont pas une garantie absolue : leur efficacité dépend de la maintenance, du respect des cycles et de la charge, et les défauts de désinfection thermique sont une cause documentée d'épidémies de service. Le protège-bassin supprime purement et simplement cette étape : il n'y a plus de bassin souillé à retraiter, donc plus de chaîne de contamination associée. Pour les établissements dépourvus de lave-bassin, ou dont l'équipement est en panne, en saturation ou en maintenance, c'est une solution de continuité immédiate.

Contextes d'utilisation

Ce **sac hygiénique pour bassin de lit** trouve sa place dans l'ensemble des structures prenant en charge des patients dépendants ou alités :

- **Services hospitaliers** de médecine, chirurgie, gériatrie, soins de suite et de réadaptation, soins intensifs
- **EHPAD et unités de soins de longue durée**, où le volume quotidien de bassins est élevé et le temps soignant compté
- **Hospitalisation à domicile et maintien à domicile**, où le lave-bassin n'existe pas et où l'aidant doit pouvoir gérer seul l'élimination
- **Transport sanitaire et urgences**, où l'immobilisation du patient et l'exiguïté de l'espace rendent toute manipulation de liquide risquée
- **Dispensaires, structures de santé en Afrique francophone et missions humanitaires**, où l'absence d'eau courante fiable, d'électricité stable ou de lave-bassin rend le retraitement des bassins difficile voire impossible : le protège-bassin apporte une réponse autonome, sans infrastructure

Caractéristiques techniques

- **Fabricant** : Dr HELEWA – référence B60020
- **Composition du dispositif** : un sac de recouvrement et un tampon super absorbant intégré au fond
- **Capacité d'absorption** : 600 ml de fluides corporels
- **Mode d'action** : absorption puis gélification des liquides, neutralisation des odeurs, suppression des projections et des souillures
- **Couleur** : blanc

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Tolérance** : sac et tampon testés dermatologiquement, hypoallergéniques
- **Mise en place** : recouvrement intégral du bassin, pose et retrait sans outil
- **Élimination** : fermeture du sac après usage, puis élimination dans les déchets ménagers ou selon le protocole en vigueur dans l'établissement
- **Usage** : strictement à usage unique
- **Conditionnement** : boîte de 20 unités (un conditionnement de 150 unités existe également dans la gamme)
- **Statut réglementaire** : dispositif médical de classe I
- **Remboursement** : non inscrit à la LPPR

Compatibilité

- **Bassins de lit** : conçu pour recouvrir intégralement les bassins standard, y compris les modèles plastiques autoclavables de 2 litres et les bassins inox. La compatibilité avec les bassins de forme particulière (bassin plat dit « de fracture », modèles anatomiques spécifiques) reste **À VÉRIFIER** selon la référence utilisée dans votre service.
- **Gamme Dr HELEWA** : des protections équivalentes existent pour les seaux de chaise percée et les urinaux, permettant d'harmoniser le protocole d'élimination des excréta sur l'ensemble des dispositifs d'un service.
- **Protocole d'élimination** : la voie d'élimination — ordures ménagères ou filière des déchets d'activités de soins à risques infectieux — dépend du statut infectieux du patient et des règles internes de l'établissement. Référez-vous à votre équipe opérationnelle d'hygiène.
- **Équipement associé** : s'utilise avec les gants d'examen et la friction hydroalcoolique du poste de soins, dans le cadre des précautions standard.

Pourquoi choisir le protège-bassin Dr HELEWA ?

- **Temps soignant récupéré** : la séquence vidange, rinçage, transport, lave-bassin, séchage et rangement disparaît. Sur un service où plusieurs dizaines de bassins sont utilisés chaque jour, le gain cumulé est considérable — c'est l'argument qui emporte la décision auprès des cadres de santé, davantage que le prix unitaire du consommable.
- **Réduction du risque infectieux** : suppression du transport de matières non contenues et de l'aérosolisation associée au traitement des bassins.
- **Protection du soignant** : moins d'exposition aux projections, moins de contact avec les surfaces souillées, moins de manipulations à risque de troubles musculo-squelettiques liés au port de bassins pleins.
- **Dignité et confort du patient** : absence d'odeur persistante dans la chambre, absence de bruit de liquide, retrait rapide et discret. Pour un patient dépendant, dont l'intimité est déjà mise

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

à l'épreuve, la différence est réelle.

- **Tolérance cutanée** : sac et tampon testés dermatologiquement, adaptés aux peaux fragiles des patients âgés ou alités de longue durée.
- **Indépendance logistique** : ni eau, ni électricité, ni équipement de retraitement — déterminant en HAD, en transport sanitaire et pour les structures que SOCIMED approvisionne à l'export.
- **Économie indirecte** : moins de cycles de lave-bassin, donc moins d'eau, moins d'énergie, moins de produits de traitement, moins d'usure de l'équipement et moins de bassins remplacés pour cause de dégradation.

Questions fréquentes

S'adapte-t-il à tous les bassins de lit ?

Il est conçu pour recouvrir les bassins de lit standard. Si votre service utilise des bassins de forme atypique, demandez un échantillon de validation avant de référencer le produit en volume : l'ajustement conditionne l'étanchéité du dispositif.

Le lave-bassin devient-il inutile ?

Le bassin n'étant plus souillé, le cycle de lavage systématique après chaque usage n'a plus lieu d'être. Une procédure d'entretien périodique du bassin reste cependant nécessaire, et seule votre équipe d'hygiène peut arbitrer l'évolution du protocole de service.

Comment éliminer le dispositif après usage ?

Le sac se referme et s'élimine dans les déchets ménagers ou selon le protocole en vigueur. En cas de patient porteur d'une bactérie multirésistante ou de précautions complémentaires contact, appliquez la filière DASRI définie par votre établissement.

Le tampon suffit-il pour une selle liquide abondante ?

La capacité d'absorption est de 600 ml, ce qui couvre la grande majorité des situations. Au-delà, ou en cas de diarrhée profuse répétée, prévoyez un changement de dispositif à chaque usage et évaluez les solutions de recueil adaptées avec l'équipe soignante.

Convient-il au domicile ?

Oui, c'est même l'un de ses usages les plus pertinents : il permet à un aidant non professionnel de gérer l'élimination sans manipulation de liquide ni matériel de nettoyage spécifique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

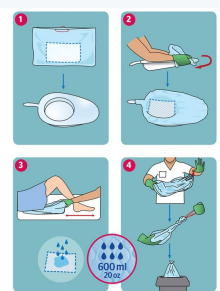
Page produit

<https://www.socimed.com/urinal/19032-urinal-masculin-jetable-dr-helewa-u60020.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Marque	Dr.helewa
Référence Euromedis	U60020

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com