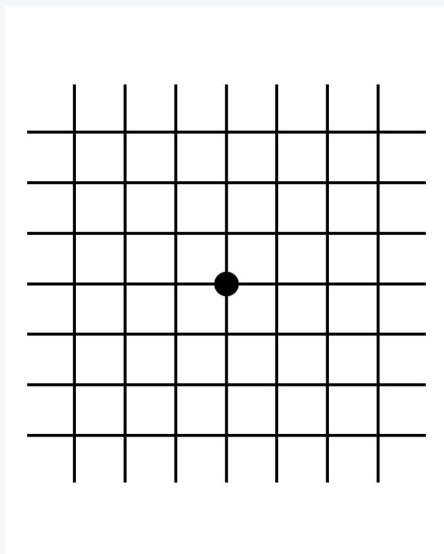


FICHE PRODUIT

Grille de AMSLER

Référence : SOC-AMSLER

Points forts

- délais : 5 Jours
- Garantie : 1

Description du produit

DESCRIPTION

- Le test de la grille d'Amsler est utilisé pour la détection précoce de la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
- Ce symptôme, encore appelé métamorphopsie, signe le plus souvent une atteinte de la région centrale de la rétine, la macula.
- Il est caractérisé par une ondulation ou une déformation des lignes à la lecture.
- Lorsqu'une surveillance régulière est mise en place, on peut rechercher l'apparition des métamorphopsies avec une grille d'Amsler.

Pour effectuer ce test, procédez de la manière suivante (si vous utilisez des lunettes ou des lentilles pour lire, mettez-les) :

1. Positionnez la grille à la distance habituelle de la lecture (à une distance d'environ 30 à 40 cm).
2. Recouvrez votre œil droit à l'aide d'un cache.
3. Fixez avec votre œil gauche le point situé au milieu de la grille.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Les lignes sont-elles droites?
- Tous les carrés ont-ils la même taille?
- Voyez-vous les quatre coins?
- Des emplacements vides, distordus et flous ou des lignes ondulées sont-ils visibles?

4. Répétez le test avec l'autre œil.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5294-grile-de-amsler.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com