


FICHE PRODUIT

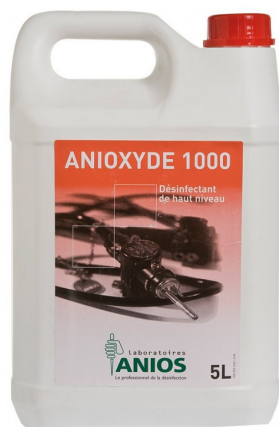

Désinfectant ANIOXYDE 1000, Bidons de 5L avec activateur intégré

Référence : SOC-ANI1081299

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Indications

- Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

Caractéristiques

- Absence de vapeur d'acide acétique : meilleure tolérance pour l'utilisateur
- Utilisation simplifiée : activateur intégré au bidon de 5L
- Efficacité du produit démontrée à 900ppm d'acide peracétique.
- Stabilité de l'acide peracétique démontrée : 7 jours/ 50 endoscopes
- Compatible avec tout type de produit nettoyant pré-désinfectant à pH neutre
- Compatible avec tout type de bacs et paillasse
- Peut s'utiliser en présence de système d'aspiration des vapeurs
- Maîtrise de la corrosion des métaux par la présence d'agents anticorrosifs
- La solution désinfectante contient 1500ppm d' APA (après activation) à 900ppm (concentration limite détectée par les bandelettes).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mode d'emploi :

- **Etape de pré-désinfection :** Nettoyer le dispositif médical avec un produit de type ANIOSYME DD1, HEXANIOS G+R, SEPTANIOS MD ou ANIOSYME PLA II. Rincer soigneusement. Pour le matériel endoscopique : écouvillonner et irriguer.
- **Etape de désinfection : verser la solution activée** (voir procédure d'activation de la solution sur l'étiquette/protocole). Couvrir le bac. **Temps de contact : 5 minutes.** Pour le matériel endoscopique : faire circuler la solution à l'intérieur des canaux.
- Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau stérile ou filtrée (0,2µm). Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur.
- Essuyer avec un champ à usage unique. Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

Composition: Production extemporanée d'acide peracétique à partir de l'acétylcaprolactam (système PHERA®). ANIOXYDE 1000-GÉNÉRATEUR contient 3% de peroxyde d'hydrogène.

Précautions d'emploi :

- Dangereux - respecter les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
- Stockage : de +5°C à +25°C.
- Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).
- **STOCKER EN POSITION VERTICALE**

Propriétés microbiologiques : Actif sur Bactéries, Mycobactéries, Levures /Moisissures, Virus, Spores. Temps de contact 5 min

Conditionnement : 4 bidons de 5 L + activateur intégré

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/les-desinfectants-de-haut-niveau/7392-desinfectant-anioxyde-1000-bidons-de-5l-avec-activateur-integre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com