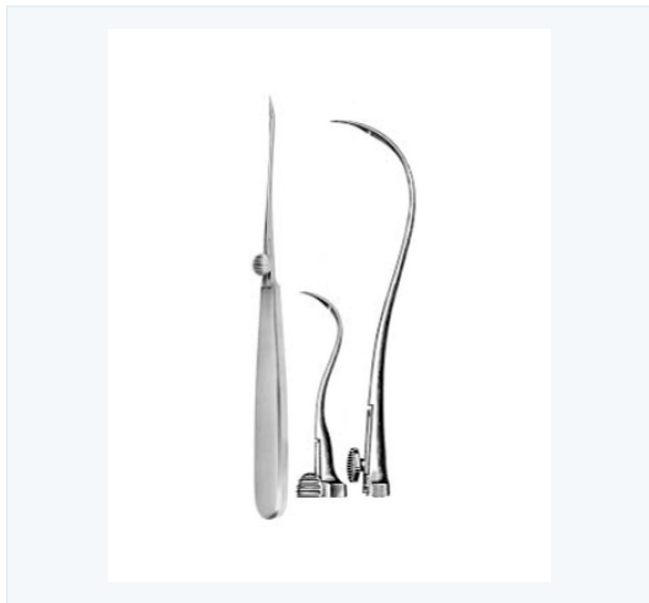


FICHE PRODUIT

Aiguille de reverdin 20 cm courbe, fig 4

Référence : SOC-421520

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Aiguille de Reverdin courbe:

Dimensions: 20 cm.

Consignes générales :

Tout instruments neuf doit être nettoyé, désinfecter et stériliser avant une première utilisation.

Après leur utilisation, nettoyer, désinfecter et stériliser les instruments aussi rapidement que possible.

Tous les instruments usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des dommages quelconques doivent être jetés et détruit.

Nettoyage, désinfection :

Pour la désinfection et le nettoyage, toujours respecter scrupuleusement le dosage, le temps d'application et les températures conseillés.

Les surcharges dans les machines à laver et les appareils à ultrasons sont à éviter. Veillez à placer les produits sans risques de zones d'ombres.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Il est totalement interdit d'utiliser des brosses ou des éponges métalliques pour le nettoyage manuel.

Rincer minutieusement après le lavage en utilisant de l'eau déminéralisée dans la mesure du possible.

Sécher les produits avec soin après le rinçage.

Stérilisation :

Ne pas oublier que la stérilisation n'est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection.

Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.

Il est recommandé de stériliser les instruments dans un autoclave à vapeur.

- Température : 134°C
- Pression : 2 bars
- Durée : 18 minutes Laisser refroidir les produits stérilisés ainsi, avant tout usage.

Dans tous les cas et avant tout, respecter les consignes réglementaires et celles du fabricant relatives à la stérilisation et à l'utilisation des autoclaves.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-de-reverdin/774-aiguilles-de-reverdin-20-cm-courbe.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com