


## Bande Shakir pour enfants (Bande MUAC)

Réf. SOC-MUAC01

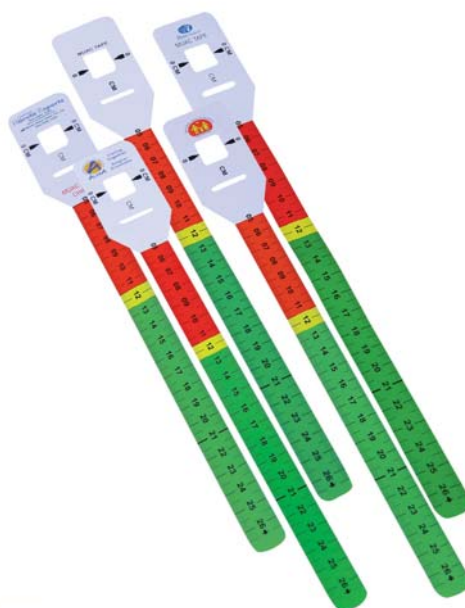

La bande Shakir pour enfant est utilisée pour évaluer l'état nutritionnel chez les enfants de 6 mois à 59 mois.

La couleur rouge indique la malnutrition sévère, la couleur jaune indique la malnutrition aiguë et la couleur verte indique la normale.

Fabriqué à partir de plastique PVC / papier durable et les mesures sont marquées en millimètres.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Description :

### **Matériel**

- Fabriqué à partir de PVC, papier de haute qualité qui est pliable.
- Plastique résistant à l'étirement, papier plastifié, papier synthétique.
- Épaisseur minimum 0.3mm.

### **La mesure**

- Gradué en 1mm de précision avec une ligne plus épaisse à 21,0 cm.

### **Impression**

- Permanent, résistant aux solvants; facilement lisible dans des situations de travail à faible éclairage.

### **Code couleur**

- Vert : à partir de 12.5 cm.
- Rouge : de 0 – 11.5 cm.
- Jaune : 11.5 – 12.5 cm.

## Caractéristiques de la bande Shakir

- Fabriqué à partir de PVC de haute qualité qui est pliable.
- Âge 6 mois à 59 mois.
- Convient pour la gamme de mesure jusqu'à 26.5cm.
- Gradué en 1 mm de précision avec une ligne plus épaisse.
- Suivant toutes les spécifications de l'OMS code couleur et les gradations.
- À 21,0 cm. Rouge - 0 à 11,5 cm Jaune - 11,5 cm à 12,5 cm Vert - à partir de 12,5 cm.
- Conditionnement minimum : Boîte de 100.
- Epaisseur : 0.32 mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration