

FICHE PRODUIT



Stimulateur cardiaque externe TRIPLE chambre, Modèle PACE 300

Référence : SOC-OSP300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques du Stimulateur cardiaque externe TRIPLE chambre, Modèle PACE 300

- Configuration facile des paramètres de stimulation par des cadrans ergonomiques et des touches programmables
- Fonction à débit élevé pour une stimulation atriale rapide jusqu'à 1 000 ppm (réglable tout en appliquant une stimulation atriale rapide)
- Activer le mode de stimulation d'urgence (D00, 12 V, 80 ppm, BV) en appuyant sur le bouton "URGENCE"
- Mesure pratique des amplitudes des pics d'onde P / R tout en appuyant sur le bouton "PAUSE"
- PVARP et MTR en fonction du taux de stimulation sélectionné
- Fonction AUTO SENSE en option qui suit automatiquement les amplitudes des pics d'onde P / R et ajuste les sensibilités auriculaires et ventriculaires en conséquence
- Le mode automatique passe en mode asynchrone lors de la détection d'interférences
- Surveillance continue de l'épuisement de la batterie et de l'intégrité du système de stimulation
- Un grand écran rétro-éclairé informe rapidement sur l'état de la batterie, le mode de stimulation, les paramètres, les fonctions automatiques activées et la surveillance de la sécurité du système de

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

dérivation

- Les LED indiquent si les boutons pour la production ventriculaire et la sensibilité s'appliquent à RV + LV, RV seulement ou LV seulement
- Personnalisez, sauvegardez et rappelez les valeurs de paramètres préréglées pour une configuration rapide
- Options de menu multilingue, y compris anglais, espagnol, allemand, français, italien ou suédois
- La pile alcaline 9 V standard offre au moins 8 jours de fonctionnement continu (DDD, paramètres standard)
- L'alimentation AC en option économise l'énergie de la batterie. La batterie doit rester dans le compartiment de la batterie en cas de coupure d'alimentation CA
- Système de câble patient avec connexions brevetées avec broches protégées pour des connexions électriques pratiques et fiables afin d'augmenter la sécurité des patients

Spécifications techniques du Stimulateur cardiaque externe TRIPLE chambre, Modèle PACE 300

L'ensemble comprend: Batterie standard 9V, 3 rallonges ATAR et un étui de transport.

Taux de stimulation : 30 - 220 ppm

Taux de suivi maximum : 80-230 ppm

Stimulation de l'overdrive atriale: 70 - 1000 ppm

Amplitude de stimulation: 0,1- 18 V $\pm$ 10%

Durée d'impulsion: 0,05 - 1,5 ms $\pm$ 5%

Atrium de sensibilité: 0,2 - 20 mV $\pm$ 10%, infini, ventricule: 1,0 - 20 mV $\pm$ 10%, infini

Période réfractaire: 250 - 400 ms; 100 - 500 ms; 250 ms

Délai A-V : 5 ms - 400 ms $\pm$ 5% $\pm$ 2 ms

Délai de stimulation: V-V VVD 5 ms - 80 ms $\pm$ 5% $\pm$ 2 ms

Modes de stimulation : DDD (BV), DDD (LV), DDD (RV), VVI (BV), VVV (LV), VVI (RV), AAI, VDD (BV), VDD (RV), VDD (LV), DDT , DDI, DVI, DAI, DDD + AT, DAT, DOO, ODO, VVT, VOO, AAT, AOO, VDI, TVA

Garantie limitée standard de 2 ans

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

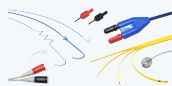
Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-defibrillateur/10898-stimulateur-cardiaque-externe-triple-chambre-modele-pace-300.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com