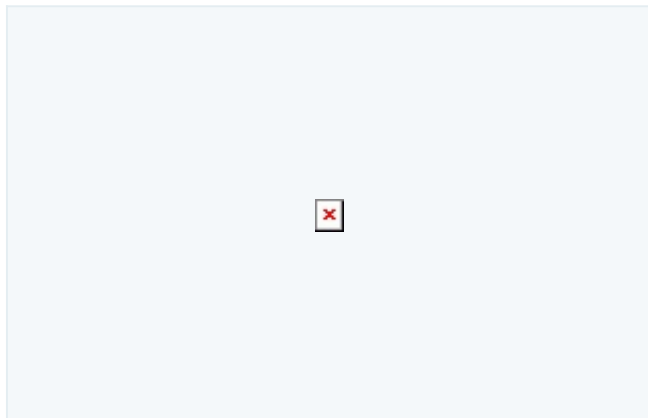


FICHE PRODUIT

Moniteur foetal, modèle BT-350

Référence : SOC-BT-350

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur fœtal, modèle BT

Le BT-350 LCD est un moniteur fœtal antepartum affichant FHR et FM sur l'écran LCD pour vérifier la santé du fœtus. Le BT-350 LED a les mêmes fonctions que le type LCD, à la différence qu'il a une grande LED à 7 segments indiquant tous les paramètres de réglage et n'ayant pas de mode Tendance.

Il dispose également d'un marqueur d'événements permettant à une femme enceinte dans son lit d'indiquer le point de mouvement du fœtus en appuyant sur le bouton elle-même lorsqu'elle sent le mouvement du fœtus. BT-350 indique FHR en chiffres en irradiant des ultrasons au niveau de l'abdomen, en abstrayant la fréquence du cycle de battement cardiaque à partir des signaux réfléchis par le cœur du fœtus, en émettant le changement de FHR sous forme de son et en analysant ces signaux. En outre, vous pouvez mesurer la CU en utilisant un capteur de pression. Le BT-350 imprime les formats FHR, UC et FM sur le papier thermique et les affiche sur l'écran LCD. En particulier, la sonde doppler a 9 capteurs à cristal pour attraper efficacement le FHR, et est de type étanche. Le BT-350 dispose de 2 types de fonctions d'instrumentation, telles que l'ordinateur portable et le montage mural.

Accessoires standards:

- Sonde Doppler
- Sonde UC

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Mark Jack
- Ceinture de sonde
- Papier thermique
- 250ml de gel à ultrasons
- Adaptateur de courant

Options:

- AST (stimulateur acoustique)

- Batterie rechargeable
- Sac de transport
- Support mural

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiocographe/13471-moniteur-foetal-modele-bt.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
moniteur_ecran - LED	SOC-BT-350E	
moniteur_ecran - LCD	SOC-BT-350L	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com