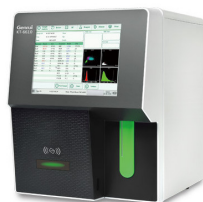


FICHE PRODUIT

Analyseur Hématologique 5-Diff modèle KT-6610

Référence : SOC-KT6610

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Analyseur Hématologique 5-Diff modèle KT-6610

L'**Analyseur Hématologique 5-Diff, modèle KT6610** est un **appareil de laboratoire d'analyses médicales** utile pour identifier, analyser et quantifier les **composants du sang** entier par impédance, cytométrie de flux, la dispersion laser triangulaire pour la différenciation et le comptage des **globules blancs**.

Compact et puissant

Des résultats précis et fiables.

La cytométrie de flux (FCM), la dispersion laser triangulaire pour la différenciation et le comptage des globules blancs.

Chaîne dédiée pour Baso.

Solution diagnostique complète

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

3 réactifs seulement, les lyses sont placées dans la machine.

Calibrateur de marque international et de QC fournis.

Design intelligent

Pas besoin de PC supplémentaire, lecteur de code à barres intégré et imprimante thermique.

Spécifications techniques de l'Analyseur Hématologique 5-Diff modèle KT-6610:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Principe:	-Diffusion laser triangle, cytométrie en flux pour la différenciation et le comptage des globules blancs -Impédance pour le comptage RBC et PLT Méthode sans cyanure pour l'HGB
Paramètres:	-25 paramètres: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym #, Mon #, Neu #, Eos #, Bas #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW- CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. -4 paramètres de recherche: LIC%, LIC #, ALY%, ALY # -2 histogrammes pour RBC et PLT -4 diagrammes de dispersion pour différentiel WBC
Débit:	60 échantillons par heure
Étalonnage:	Calibration manuelle et automatique
Contrôle de qualité:	-3 niveau QC, -Graphe LJ, XB
Volume de l'échantillon:	Mode -CBC + Diff: 20µL Mode pré-dilué: 20µL
Réactifs:	-3 réactif (2 lyse + 1 diluant) -1 nettoyant PB pour la maintenance
Imprimer:	Imprimante thermique intégrée, prise en charge d'une imprimante externe
Mode d'échantillonnage:	Mode ouvert, scanner de codes à barres intégré
Entretien:	Auto-nettoyage de la sonde de prélèvement et des tubes
Température:	10 -30
Interface:	-4 ports USB, 1 port LAN -HL7 protocole, supporte LIS
Blocage clair:	Haute tension, chasse haute pression
Puissance:	CA 100-240V, 50/60 ± 1Hz
Dimensions:	L430mm × W350mm × H435mm
Affichage:	Écran tactile couleur de -10,4 pouces -Affichage à cristaux liquides (LCD) -Résolution: 800 × 600
Mémoire de stockage:	-60 000 résultats d'échantillon avec -cartes graphiques et histogrammes

Performance:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Paramètres	Précision (CV)	Gamme de linéarité
WBC	$\leq 2,0\%$ ($4,0-15,0 \times 10^9$) / L	($0-100,0 \times 10^9$) / L
RBC	$\leq 1,5\%$ ($3,5 \text{ à } 6,0 \times 10^{12}$) / L	($0-8.00 \times 10^{12}$) / L
HGB	$\leq 1,5\%$ (110,0 - 180,0 g) / L	(0-250) g / L
MCV	$\leq 1,0\%$ (70,0 - 120,0) fL	
PLT	$\leq 4,0\%$ ($150,0 - 500,0 \times 10^9$) / L	($0-1000 \times 10^9$) / L

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/13591-analyseur-hematologique-5-diff-modele-kt-6610.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com