

FICHE PRODUIT

Protège-seau Dr HELEWA - chaise percée, 600 ml, boîte de 20

Référence : SOC-EURC60020

Points forts

- Marque : Dr.helewa
- Référence Euromedis : U60020

Description du produit

Protège-seau Dr HELEWA : supprimer le nettoyage du seau de chaise percée

Le **protège-seau** Dr HELEWA est un sac hygiénique à usage unique conçu pour tapisser le seau d'une chaise percée. Il se compose d'un **sac étanche en polyéthylène** de 52 x 40 cm, qui recouvre le fond et les bords du réceptacle, et d'un **tampon super absorbant** placé au fond, capable d'absorber et de gélifier jusqu'à **600 ml** de matières et d'urines.

L'intérêt est direct : le seau n'est jamais souillé. Fini la séquence vidange, rinçage, brossage, désinfection, qui constitue l'une des tâches les plus pénibles et les plus exposantes du quotidien soignant comme du quotidien de l'aidant. Après usage, le sac se referme par ses **liens coulissants**, devient hermétique, et s'élimine tel quel. Le contenu ayant été gélifié, il ne coule pas, n'éclabousse pas et ne dégage pas d'odeur pendant le transport jusqu'au point d'élimination.

Ce **sac hygiénique pour chaise percée** relève d'une logique de confinement à la source, approche désormais centrale dans la prévention de la transmission croisée en établissement. Les excréta sont contenus dès leur émission et ne quittent plus le sac jusqu'à leur élimination finale : la chaîne de contamination par le contenant, les mains et les surfaces est interrompue.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Contextes d'utilisation

- **Maintien et hospitalisation à domicile**, où l'aidant familial doit gérer seul l'élimination sans équipement de nettoyage adapté — c'est l'usage où le gain de confort est le plus spectaculaire
- **EHPAD et unités de soins de longue durée**, où les chaises percées sont utilisées plusieurs fois par jour et par résident
- **Centres de rééducation fonctionnelle** et suites opératoires, pour les patients en reprise d'autonomie
- **Services hospitaliers**, en particulier lors de précautions complémentaires contact ou d'épisodes épidémiques digestifs, où la circulation d'un seau souillé est un vecteur à supprimer
- **Dispensaires et structures de santé en Afrique francophone**, où l'absence d'eau courante fiable rend le nettoyage d'un seau difficile, voire impossible dans des conditions satisfaisantes

Caractéristiques techniques

- **Fabricant** : Dr HELEWA – référence C60020
- **Type** : sac hygiénique à usage unique avec tampon super absorbant intégré, pour seau de chaise percée
- **Capacité d'absorption** : 600 ml (20 oz) de matières et d'urines, absorption ultra-rapide puis gélification
- **Dimensions du sac** : 520 × 400 mm
- **Matière du sac** : polyéthylène 30 µ, étanche
- **Composition du tampon** : micro-cellulose et polymères super absorbants (polyacrylate de sodium) sur support non-tissé, avec papier de soie absorbant ; dimensions du tampon environ 13 × 24 cm (À VÉRIFIER)
- **Technologie** : tampon Alveol-Technology à texture alvéolée — absorption plus rapide, tampon enveloppé qui ne disperse ni poussière de cellulose ni poudre dans le sac ou sur la peau
- **Fermeture** : liens coulissants, sac hermétique après fermeture
- **Tolérance** : testé sous contrôle dermatologique, hypoallergénique
- **Stérilité** : produit non stérile
- **Usage** : externe, strictement à usage unique
- **Conditionnement** : boîte contenant un rouleau de 20 sacs
- **Couleur** : À VÉRIFIER (blanc, par cohérence avec la gamme)
- **Statut réglementaire** : dispositif médical de classe I, marquage CE
- **Élimination** : déchets ménagers ou selon le protocole en vigueur dans la structure

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Compatibilité

- **Chaises percées** : s'adapte aux seaux de chaise percée, de chaise garde-robe et de fauteuil de toilette du commerce. Compte tenu de la diversité des seaux, validez l'ajustement sur votre modèle avant un référencement en volume.
- **Autres usages** : le format 52 × 40 cm permet également de tapisser un bassin de lit, une cuvette ou une assise de WC, ce qui en fait la référence la plus polyvalente de la gamme — utile pour une structure qui souhaite limiter le nombre de références en stock.
- **Gamme Dr HELEWA** : le protège-bassin de lit et l'urinal masculin jetable complètent ce dispositif pour couvrir l'ensemble des situations de recueil.
- **Précautions standard** : s'utilise avec gants d'examen et friction hydroalcoolique.

Pourquoi choisir le protège-seau Dr HELEWA ?

- **Suppression d'une tâche pénible** : le nettoyage du seau de chaise percée est l'un des gestes les plus désagréables du soin. Le supprimer a un effet direct sur l'acceptabilité du poste et sur la qualité du service rendu.
- **Temps soignant récupéré** : sur une structure où plusieurs résidents utilisent quotidiennement une chaise percée, le cumul annuel est considérable. C'est l'argument à présenter à un cadre de santé, davantage que le prix unitaire du sac.
- **Polyvalence** : un seul format couvre le seau, le bassin et la cuvette — simplification du stock et de la formation des équipes.
- **Confinement hermétique** : les liens coulissants ferment le sac en un geste, sans contact avec le contenu.
- **Confort cutané** : le tampon enveloppé ne libère ni poudre ni particules, un point concret pour les peaux fragiles des personnes âgées.
- **Dignité du résident** : absence d'odeur persistante dans la chambre et retrait discret et rapide, là où le nettoyage d'un seau impose une manipulation prolongée et visible.
- **Autonomie logistique** : ni eau, ni produit, ni brosse, ni local de nettoyage.

Questions fréquentes

S'adapte-t-il à tous les seaux de chaise percée ?

Le format 52 × 40 cm couvre la grande majorité des seaux du marché. Les modèles de très grand diamètre ou de forme atypique méritent une validation par échantillon avant commande en volume.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Peut-on l'utiliser ailleurs que sur un seau ?

Oui. Ses dimensions permettent également de l'employer sur un bassin de lit, une cuvette ou une assise de WC. C'est la référence la plus polyvalente des trois de la gamme.

Faut-il encore nettoyer le seau ?

Le seau n'étant plus souillé, le nettoyage après chaque usage n'a plus lieu d'être. Un entretien périodique reste recommandé, selon le protocole défini par votre structure ou votre équipe d'hygiène.

Comment éliminer le sac après usage ?

Fermez-le par ses liens coulissants et éliminez-le dans les déchets ménagers ou selon le protocole en vigueur. En cas de patient porteur d'une bactérie multirésistante ou de précautions complémentaires, appliquez la filière DASRI de votre établissement.

Quelle différence avec le protège-bassin de la gamme ?

Le principe est identique — sac et tampon absorbant de 600 ml. Le protège-seau est dimensionné pour le seau de chaise percée et son format plus large le rend polyvalent, tandis que le protège-bassin est ajusté au bassin de lit.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/urinal/19033-protège-seau-chaise-percée-dr-helewa-c60020.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Marque	Dr.helewa
Référence Euromedis	U60020

Photos du produit

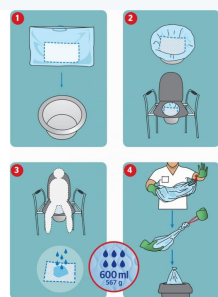

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com