

FICHE PRODUIT



Fauteuil dentaire monté vers le haut, Modèle CARE-33A

Référence : SOC-RYS-301021

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Fauteuil dentaire monté vers le haut, Modèle CARE-33A

Suggestion :

Danger : le bloc d'alimentation doit avoir un fil fiable de mise à la terre.

Chaleur : Couper l'alimentation avant le nettoyage et maintenir.

Conseil : Couper l'alimentation générale après le fonctionnement.

1. Il devrait y avoir suffisamment d'espace pour l'opération autour du dispositif.
2. Nettoyer l'hydrocèle dans la pression de filtrage d'air réduit la valve immédiatement (Clean the hydrocele in Air filtering pressure reducing valve in time).
3. Nettoyer ou changer les filtres d'eau à sel à temps.
4. Eviter des pressions très élevées lors de l'utilisation de turbine, cela pourrait raccourcir la durée de vie.
5. Eviter d'utiliser des pièces à main sans fraises de remplissage, au risque d'écourter la durée de vie.
6. Assurez-vous que l'appui-tête s'est verrouillé après l'avoir ajusté.
7. Évitez d'utiliser des chiffons grossiers et réduisez le temps de nettoyage lorsque vous nettoyez

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

la lampe orale.

8. Ne touchez pas la lampe orale lorsqu'elle fonctionne.
9. Recouvrez l'ampoule de la lampe orale avant de la remplacer.
10. Evitez d'appuyer sur l'interrupteur d'allumage du chauffe eau, lorsqu'il n'y a pas d'eau.
11. Evitez de mettre trop de chose sur le plateau à instruments.
12. Réinitialiser le fauteuil dentaire après utilisation.
13. Essayez de garder l'environnement propre et sec pour prolonger la durée de vie.

Assistance :

La garantie de ce produit est d'un an à partir du jour où vous achetez ce produit. Au cours de cette période, pour tout problème survenant dans les conditions normales d'utilisation et obéissant au manuel de fonctionnement, notre société vous apportera gratuitement la maintenance nécessaire.

1. Conseils fournis gratuitement par des experts.
2. Fourniture des pièces gratuites pendant la période de garantie.
3. Fourniture gratuite des solutions et de l'assistance technique pendant la période de garantie
4. 24 heures de système Q&A promis, et fourniture de solution dans les 3 jours.
5. Le technicien fournira un service porte-à-porte dans le cas où le produit ne fonctionne pas bien au cours de la période de garantie.

Paramètres de commodités :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Pression de l'eau	0.2-0.4MPa
Pression de l'air	≥0.55MPa
Débit du gaz	≥50L/min
Conditions environnementales	Bonne ventilation de l'environnement intérieur
Température environnementale	5 °C-40 °C
Humidité relative (RH)	≤80%
Alimentation	AC220V-50Hz/60Hz
Puissance d'entrée	1000W
Distance entre la chaise et le sol	≤460mm - ≥860mm
Mouvement de l'appui-tête	≥140mm
Intervalle d'inclinaison du fauteuil	110°-170°
Longueur du fauteuil dentaire	1900mm
Vitesse de descente du fauteuil dentaire	≥ 300mm/min
Charge du fauteuil dentaire	≥135KG
Vitesse de la pièce à main turbine à haute vitesse	≥300000 r/min
Vitesse de la pièce à main moteur à air à faible vitesse	≥14000r/min
Lampe orale ajustable	8000—15000Lux-couleur de température 3000—5000K
Système d'aspiration	Taux d'aspiration ≥800ml/min
Vitesse d'eau du bassin	≥1000ml/min
Plateau à instruments	Degré de charge maximale≤3°

Configuration standard de l'unité dentaire et caractéristique:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Configuration des produits	Nombre	Caractéristiques
Pièce à main turbine haute vitesse (4 trous)	2 pièces	Anti-résorption et soufflage & fonction de coupe
Pièce à main moteur à air à faible vitesse	1 pièce	Avec tête d'angle droite
Seringue à 3 voies	2 pièces	Avec système d'approvisionnement en eau à température constante
Système de chauffage de l'eau	1 pièce	Intervalle de température : 35°C - 45°C
Système d'aspiration	1 pièce	Fonction temporisation
Lampe orale ajustable	1 pièce	8000—15000Lux □couleur de température 3000—5000K
Visionneuse de Film	1 pièce	Type de visionneuse de film à benne spéciale
Box latéral rotatif	1 pièce	Équipé d'un roulement du bassin en céramique
Système de nettoyage	1 pièce	Emplacement supérieur de la bouche d'eau, facilite le remplissage
Type de blocage d'air à main	1 pièce	Interrupteur de verrouillage de l'air contrôlé électroniquement
Interrupteur à pédale	1 pièce	Nouveau type d'interrupteur à pédale multifonctionnel

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-dentaire/6357-fauteuil-dentaire-monte-vers-le-haut-modele-care-33a.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

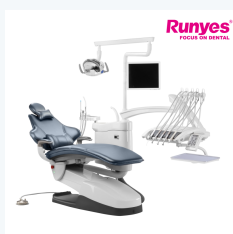

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com