


**FICHE PRODUIT**

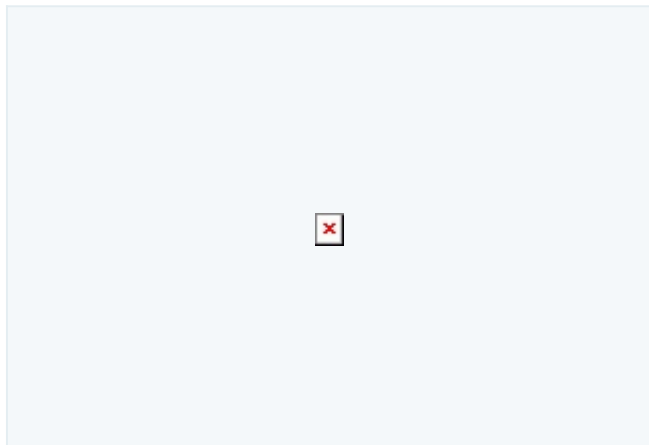

## CHAMP VISUEL, Modèle APS-6000Ber

Référence : SOC- APS-6000Ber

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### • Caractéristiques du champ visuel, modèle APS-6000Ber

- Inspection dynamique de la position des yeux ;
- Inspection environnemental de l'éclairage ;
- PC externe ;
- Le champ visuel est une procédure automatisée spéciale utilisée pour réaliser la périmétrie, un test qui mesure la surface entière de la vision périphérique visible lorsque l'œil est fixé sur un point central ; durant ce test, des lumières d'intensités variées apparaissent dans différents angles du champ visuel pendant que l'œil du patient est fixé sur une cible précise ; la perception de ces lumières est tracée puis comparée aux résultats d'un œil sain du même âge que le patient dans le but de déterminer s'il ya des dommages ; les patients avec un glaucome sont souvent soumis à ce test sur une base régulière dans le but de déterminer la vitesse de progression de la maladie.

### • Caractéristiques générales du champ visuel, Modèle APS-6000Ber

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

| Type d'éclairage                                   | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stimulateur d'écran</b>                         | Bol hémisphérique, rayon de 30 cm intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Source d'éclairage</b>                          | Diode électroluminescente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Taille de l'éclairage</b>                       | Goldmann III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Energie de stimulation</b>                      | ≤10000 abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Durée de stimulation</b>                        | Ajustable de 0,2 à 2s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Couleur de l'éclairage</b>                      | Jaune, rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Etape d'éclairage</b>                           | Total v27, étape 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Temps de retardement de l'éclairage</b>         | Ajustable de 0,2 à 2s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Eclairage auxiliaire</b>                        | 4 abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Taille du cadre</b>                             | 35 mm (optionnel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Numéro de stimulation</b>                       | 144(0-60D) ,72 (0-30D), 61(0-10D rouge), 114 (tache aveugle)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Intervalle de déplacement de la mentonnière</b> | Verticale 70mm, horizontale 90m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Méthode de fixation</b>                         | Surveillance automatique avec deux options disponible.<br>Méthode de tache aveugle, méthode de suivi de l'œil<br>Dans les deux méthodes, les erreurs de fixation sont immédiatement annoncées par des alertes visuelles et audibles<br>La caméra vidéo standard doit fournir une vidéo de l'œil du patient pour une surveillance supplémentaire |
| <b>Champ d'application de l'inspection</b>         | Test de défaut (0-60D), test de la tache jaune (centrale 0-10D), test Central 0-30D, test Quadrant, test Périphérique (60-90D), test de tache aveugle, test coutumier                                                                                                                                                                           |
| <b>Tension/ puissance</b>                          | 110-220V/ 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Poids</b>                                       | ± 18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

• **Caractéristiques techniques du champ visuel, Modèle APS-6000Ber**

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

| Apparence                                             | Type séparé                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode de test</b>                                   | Périmétrie statique                                                                                                                                                                                             |
| <b>Portée du test</b>                                 | 0-90°                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Test de distance</b>                               | 300mm                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Couleur de la cible visuelle</b>                   | rouge, blanc                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de la cible visuelle</b>                     | 390 points (rouge 61, blanc 329 points)                                                                                                                                                                         |
| <b>Taille de la cible visuelle</b>                    | 2.0 cd/m                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Intervalle entre la cible visuelle et le temps</b> | Adaptation du patient, standard, lent, habituel                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimensions de la pupille</b>                       | Automatique                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mouvement de la tête</b>                           | AEC inspection de la position des yeux et système de correction automatique                                                                                                                                     |
| <b>Détecteur de luminosité</b>                        | Luminosité automatique, système de détection et de correction                                                                                                                                                   |
| <b>Détecteur de stratégie</b>                         | Dynamique intelligente, dynamique intelligente rapide, seuil plein, seuil rapide, habituel, deux notation, trois notation, quantification des défauts                                                           |
| <b>Seuil de la police</b>                             | Lié à l'âge, le seuil, la force unique                                                                                                                                                                          |
| <b>Seuil du mode de test</b>                          | Centré 0-10'', centré 0-30'', centré 0-60'', périphérique 60-90'', détection d'angle mort                                                                                                                       |
| <b>Mode de projection</b>                             | BG, LVC, LVP, C08, D1, TG2, ST, 32, CO7, M2, N1                                                                                                                                                                 |
| <b>Contrôle de fixation</b>                           | Surveillance vidéo dynamique en temps réel, surveillance physiologique de l'angle mort, courbe de suivi de l'œil, alarme de position décalée de l'œil.                                                          |
| <b>Logiciel d'analyse</b>                             | Analyse de la fiabilité, analyse de la vision unique, triple rapport d'analyse, aperçu de la vision d'analyse, analyse en semi vision du glaucome GHT, analyse développé du glaucome GPA.                       |
| <b>Rapport du schéma</b>                              | Carte de la valeur, carte en niveau de gris, le tableau de décibel d'ensembles bios, la carte globale de probabilité, charte des écarts de déviation décibel, écart de probabilité motif et parcelle, chiffres. |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/7289-champ-visuel-modele-aps-6000ber.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)