


## Compteur de globules (automate d'hématologie), Modèle BC-5300

Réf. SOC-BC-5300



Le nouvel automate d'hématologie (analyseur automatique d'hématologie) modèle BC-5300 est un système compact combinant les toutes dernières technologies pour fournir des résultats hématologiques fiables en cinq parties à partir de seulement 20 µl de sang. Le logiciel tournant sous Windows qui permet de le piloter fournit de nombreuses fonctionnalités avancées pour accroître le rendement du laboratoire. Le BC-5300 est équipé d'un système de réglage automatique du nettoyage pour une maintenance réduite au minimum et une utilisation quotidienne la plus simple possible.

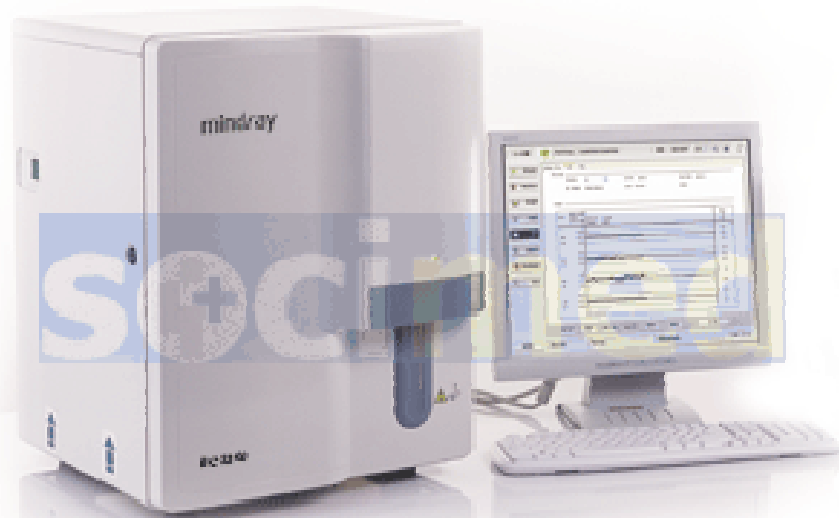

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Formule leucocytaire obtenue par diffraction laser pour une précision sans équivalent

- Technologie de laser à semi-conducteur pour une différenciation des globules blancs suivant la taille et la granulosité ;
- Algorithme de regroupement breveté pour une séparation très précise des populations ;
- Informations d'identification intuitives facilitant l'identification des échantillons pathologiques.

Seulement 1 minute et 20 µl de sang pour un rapport en 5 parties.

- Prise en charge des échantillons de sang total et capillaire en mode tube ouvert ;
- 20 µl de sang pour une numération sanguine avec formule leucocytaire et 15 µl pour une numération sanguine ;
- Cadence de 60 échantillons à l'heure ;
- Consommation réduite de réactifs.

Logiciel convivial pour une utilisation et une maintenance simplifiées

- Possibilité de personnaliser la plage de référence, le style des rapports et le planning d'auto-nettoyage ;
- Suivi du contrôle qualité au quotidien ;
- Connexion bidirectionnelle avec le système d'information du laboratoire.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration