



CONSEILS SUR LE CHOIX ET LE POSITIONNEMENT DE LA VENTOUSE

CONSEILS D'UTILISATION SELON LE POSITIONNEMENT DU BEBE

Ventouse		Taille en mm	OA	OP, OT	Césarienne
Malmström		40, 50, 60	X		
Bird		40, 50, 60 50 postérieure	X	X	
Silc Cup		50, 60	X		
Caes Aid		60			X
Bird à usage unique		X	50	X	X
Silc Cup à usage unique		X	60	X	

CONSEILS DE POSITIONNEMENT DE LA VENTOUSE

La ventouse doit être positionnée sur la zone appelée « flexion point ».

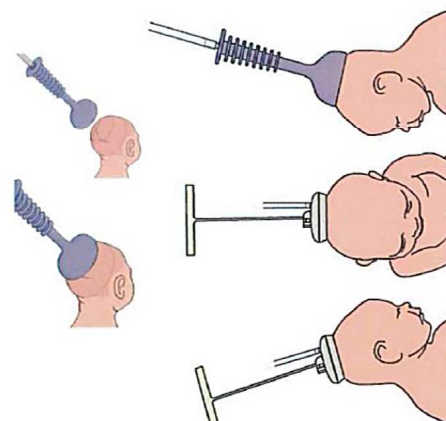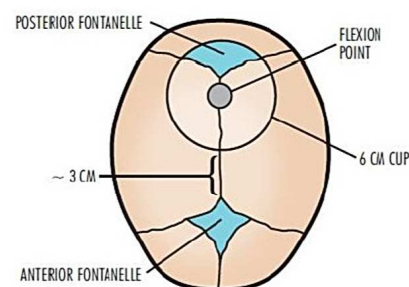

¹ According to Vacuum-assisted delivery: a review by R. W. McQuivey, The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 2004;16:171-179



Légende

OA:
Occiput anterior



OP:
Occiput posterior



OT:
Occiput transverse

Dans la mesure du possible, utiliser un diamètre plus large pour éviter le risque de blessures au niveau des tissus.

socimed